

LITEX[®] 696

無線LED光固化機

LITEX[®] 696




- 無線LED光固化機，操作方便。二段式光照設計，可避免樹脂材料因收縮而與牙齒窩洞剝離。
- 8.5mm標準規格光纖導管，可360度旋轉，適合各種照射角度並能使LED發揮最大功能。
- 本機採用鋰電池充電機制無記憶性，可連續充電提供醫師長期使用。
- 採用頂級LED光照度達1,200mW/cm²以上，10秒鐘可固化樹脂材料達4mm深度。
- 平滑流線造型，符合人體工學，提供最佳使用舒適度，且方便清潔。
- 啓動、結束及每10秒光照與電量不足均有「嗶」聲警示，並於把手面板上顯示光照倒數時間。
- LED使用壽命高達50,000小時，節省耗材更換費用。
- 輕按把手開關即可依設計之程式啓動及關閉光源。
- 內建式測光表可隨時檢測光度。
- 附有橘色護目鏡片保護操作者的眼睛。

ISO 13485 **GMP**

DENTAMERICA[®]

LITEX® 696

無線LED光固化機

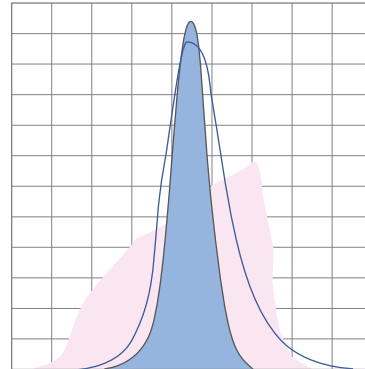

10秒可固化樹脂材料達4mm深度



內建光度指示器



規格：

- INPUT: 100-240V AC 0.4A
- OUTPUT: 9V DC 1.3A
- HANDPIECE: 150g
- CHARGING UNIT: 285g
- L180×W36×H40mm
- L134×W92×H157mm

DENTAMERICA®

亞洲分公司

登特美有限公司

台北市敦化南路二段128號7樓之1

服務專線：(02)27554445 分機 38

傳 真：(02)27554919

網 址：www.dentamerica.com.tw

經銷商

DENTAMERICA®